




Balanza Analítica AS 220.R2 PLUS

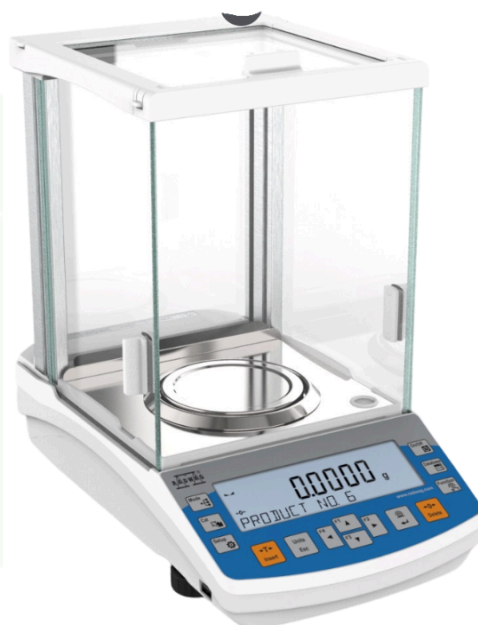

Características

- Balanza analítica de la línea RADWAG, diseñada para pesajes de alta precisión en laboratorio.
- Sistema de medición avanzado que garantiza resultados estables y repetibles.
- Cámara de pesaje amplia con puertas de vidrio, que facilita la manipulación de muestras. Base de aluminio que mejora la estabilidad del equipo.
- Sistema DUAL-CLICK, que permite desmontar la cámara de pesaje sin herramientas para limpieza.
- Nivel de burbuja frontal para verificar y ajustar la nivelación del equipo.
- Pantalla LCD clara con interfaz intuitiva y teclas programables (F1–F4).
- Calibración interna automática para mantener la precisión del pesaje.
- Gestión de usuarios con control de acceso para mayor seguridad de datos.
- Memoria ALIBI integrada, con capacidad de hasta 100.000 registros de pesaje.
- Bases de datos internas para usuarios, productos, registros y valores de tara.
- Conectividad USB-A, USB-B, RS232 y Wi-Fi opcional para transferencia de datos.
- Ideal para laboratorios químicos, farmacéuticos, universidades y control de calidad.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	AS 220.R2 PLUS
Capacidad máxima	220 g
Capacidad mínima	10 mg
Legibilidad	0,1 mg
División de legalización	1 mg
Rango de tara	-220 g
Pesada mínima USP	140 mg
Pesada mínima (U=1 %, k=2)	14 mg
Repetibilidad estándar (Máx.)	0,08 mg
Repetibilidad estándar (5 % Máx.)	0,07 mg
Repetibilidad permitida (Máx.)	0,1 mg
Repetibilidad permitida (5% Máx.)	0,09 mg
Linealidad	± 0,2 mg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	Interna (automática)
Clase OIML	I

