




Balanza Analítica AS 220.R2 PLUS

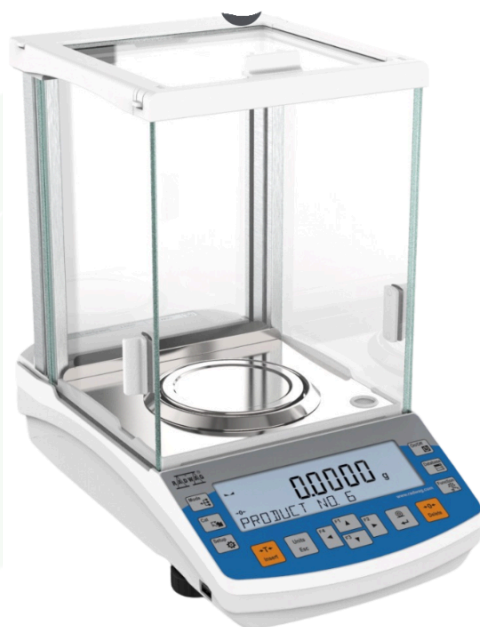

Características

- Balanza analítica de la línea SYNERGY LAB, diseñada para pesajes de alta precisión en laboratorio.
- Sistema de medición avanzado que garantiza resultados estables y repetibles.
- Cámara de pesaje amplia con puertas de vidrio, que facilita la manipulación de muestras. Base de aluminio que mejora la estabilidad del equipo.
- Sistema DUAL-CLICK, que permite desmontar la cámara de pesaje sin herramientas para limpieza.
- Nivel de burbuja frontal para verificar y ajustar la nivelación del equipo.
- Pantalla LCD clara con interfaz intuitiva y teclas programables (F1–F4).
- Calibración interna automática para mantener la precisión del pesaje.
- Gestión de usuarios con control de acceso para mayor seguridad de datos.
- Memoria ALIBI integrada, con capacidad de hasta 100.000 registros de pesaje.
- Bases de datos internas para usuarios, productos, registros y valores de tara.
- Conectividad USB-A, USB-B, RS232 y Wi-Fi opcional para transferencia de datos.
- Ideal para laboratorios químicos, farmacéuticos, universidades y control de calidad.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo | AS 220.R2 PLUS |
| Capacidad máxima | 220 g |
| Capacidad mínima | 10 mg |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| División de legalización | 1 mg |
| Rango de tara | -220 g |
| Pesada mínima USP | 140 mg |
| Pesada mínima (U=1 %, k=2) | 14 mg |
| Repetibilidad estándar (Máx.) | 0,08 mg |
| Repetibilidad estándar (5 % Máx.) | 0,07 mg |
| Repetibilidad permitida (Máx.) | 0,1 mg |
| Repetibilidad permitida (5% Máx.) | 0,09 mg |
| Linealidad | ± 0,2 mg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Calibración | Interna (automática) |
| Clase OIML | I |

