




Horno de Convección Natural BJPX-HDO43

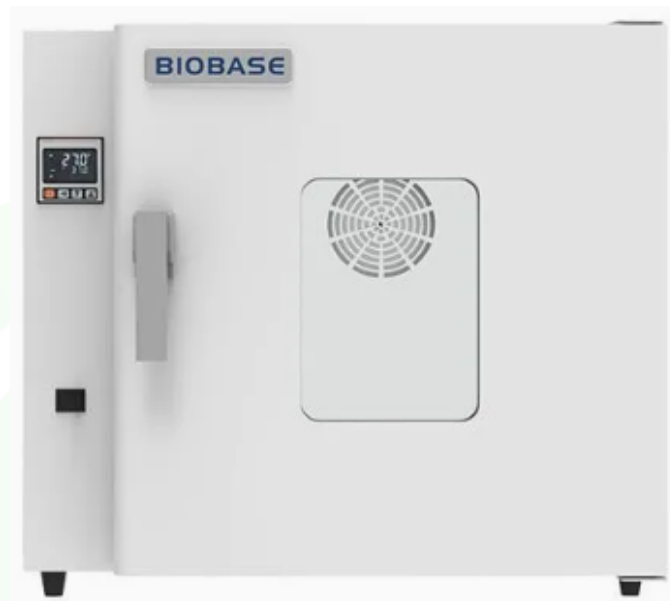

Características

- Horno de Convección Natural BJPX-HDO43, diseñado para secado uniforme y controlado en laboratorio.
- Capacidad de 43 litros, ideal para muestras pequeñas y medianas.
- Sistema de convección natural, que evita el desplazamiento de muestras ligeras.
- Calentamiento inferior, que proporciona distribución térmica estable.
- Rango de temperatura controlado (apto para secado y procesos térmicos).
- Pantalla LCD, con visualización de temperatura en tiempo real.
- Función de calibración de desviación, que mejora la precisión de medición.
- Temporizador con alta precisión, error $\leq 1\%$ para procesos repetibles.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Estructura externa en acero laminado en frío, robusta y duradera.
- Diseño de esquinas redondeadas, que facilita el mantenimiento.
- Puerta con ventana de vidrio doble, resistente a altas temperaturas y permite monitoreo.
- Función de memoria de parámetros, que restablece la configuración tras reinicio.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura y detección de fallas.
- Protección contra fugas eléctricas y sobretensión, para operación segura



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-HDO43
Capacidad	43 litros
Rango de Temperatura	Temperatura ambiente +10 °C~250°C
Resolución Temperatura	0,1°C
Fluctuación de Temperatura	± 1°C
Uniformidad de temperatura	≤ Temperatura máxima ±3%
Método de Calentamiento	Calefacción inferior, convección natural
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	2 piezas
Pantalla	LCD
Accesorios Estándar	Estantes
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora
Fuente de alimentación	CA 100~245V, 50/60Hz
Consumo	1500W
Dimensiones Internas	368 x 350 x 335mm
Dimensiones externas	597 x 510 x 530mm
Peso neto	35 kg

