




Horno de Convección Natural BJPX-HDO55

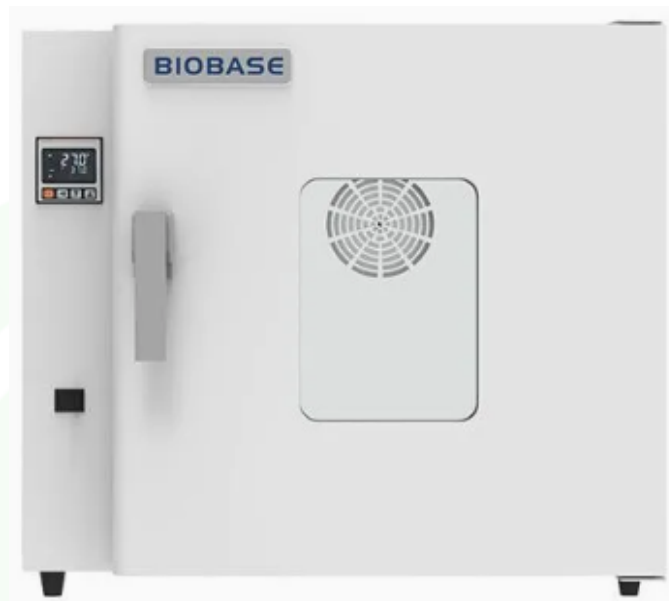

Características

- Horno de secado BJPX-HDO55, diseñado para secado uniforme y controlado en laboratorio.
- Capacidad de 55 litros, ideal para mayor volumen de muestras.
- Sistema de convección natural, que evita el desplazamiento de muestras ligeras.
- Calentamiento inferior, que garantiza estabilidad térmica.
- Rango de temperatura controlado, adecuado para secado y procesos térmicos.
- Pantalla LCD, con visualización de temperatura en tiempo real.
- Función de calibración de desviación, que mejora la precisión.
- Temporizador de alta exactitud, con error $\leq 1\%$ para resultados repetibles.
- Cámara interna en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- Estructura externa en acero laminado en frío, robusta y duradera.
- Diseño con esquinas redondeadas, que facilita la limpieza.
- Puerta con ventana de vidrio doble, que permite monitoreo sin pérdida de calor.
- Función de memoria de parámetros, que restablece la configuración tras reinicio.
- Sistema de seguridad completo, con alarma de sobretemperatura y detección de fallas.
- Protección contra fugas eléctricas y sobretensión, para operación segura.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BJPX-HDO55
Capacidad	55 litros
Rango de Temperatura	Temperatura ambiente +10 °C~250°C
Resolución Temperatura	0,1°C
Fluctuación de Temperatura	± 1°C
Uniformidad de temperatura	≤ Temperatura máxima ±3%
Método de Calentamiento	Calefacción inferior, convección natural
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	2 piezas
Pantalla	LCD
Accesorios Estándar	Estantes
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora
Fuente de alimentación	CA 100~245V, 50/60Hz
Consumo	1500W
Dimensiones Internas	370 x 370 x 430mm
Dimensiones externas	596 x 575 x 618mm
Peso neto	28 kg

